


# Hind III

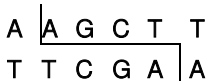

Code No. 1060AH

包装量: 10,000 U  
浓度: 50 U/ $\mu$ l

附带试剂: 10X M Buffer 1 ml  
10X Loading Buffer 1 ml

## ● 酶贮存液:

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
400 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.01%	BSA
50%	Glycerol

## ● 保存: -20°C

## ● 起源: *Escherichia coli* carrying the plasmid encoding Hind III gene.

## ● 一般反应体系:

Hind III	1 $\mu$ l
10X M Buffer	2 $\mu$ l
DNA	$\leq$ 1 $\mu$ g
灭菌水	up to 20 $\mu$ l

## ● 反应温度: 37°C

## ● 活性确认:

在 50  $\mu$ l 反应液中, 37°C 温度下反应 1 小时, 将 1  $\mu$ g 的  $\lambda$  DNA 完全分解的酶量定义为 1 个活性单位(U)。

## ● 质量控制:

请查阅各批次 Certificates of Analysis (CoA)。产品 CoA 请在 Takara Bio Inc. 网站中下载:

[http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc\\_index.php](http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php)

## ● 在各种 Universal Buffer 中的相对活性:

Universal Buffer	L	M	H	K	T (+BSA)
相对活性(%)	(60)	100	<10	40	(100)

( ) : 易受 star 活性影响

## ● Basal Buffer 中盐离子对酶活性的影响:

Salt(mM)	0	40	60	80	100	150	200
NaCl(%)	20	60	80	40	<20	<10	<10
KCl(%)	20	80	80	40	<20	<10	<10

## ● Basal Buffer 组成:

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
7 mM	MgCl <sub>2</sub>
60 mM	NaCl

## ● 各种 DNA 的切断数:

	SV	$\phi$ X	pBR	pUC	pUC	M13	Col	
$\lambda$	Ad2	40	174	322	19	119	mp18	E1
7	12	6	0	1	1	1	1	0

## ● Star 活性:

高甘油浓度、Mn<sup>2+</sup>存在、DMSO、高离子强度存在条件下, 识别序列会发生变化。

## ● Universal Buffer 组成 (-20°C 保存):

1.10XL	100 mM Tris-HCl, pH7.5	4.10XK	200 mM Tris-HCl, pH8.5
	100 mM MgCl <sub>2</sub>		100 mM MgCl <sub>2</sub>
	10 mM Dithiothreitol		10 mM Dithiothreitol
2.10XM	100 mM Tris-HCl, pH7.5		1,000 mM KCl
	100 mM MgCl <sub>2</sub>	5.10XT	330 mM Tris-Ac, pH7.9
	10 mM Dithiothreitol		(BSA 100 mM Mg-Ac
	500 mM NaCl		-free) 5 mM Dithiothreitol
3.10XH	500 mM Tris-HCl, pH7.5		660 mM K-Ac
	100 mM MgCl <sub>2</sub>		6. 0.1% BSA
	10 mM Dithiothreitol		7. 0.1% Triton X-100
	1,000 mM NaCl		

## ● 10X Loading Buffer 组成 (开封后室温保存):

0.9%	SDS
50%	Glycerol
0.05%	Bromophenol Blue

使用时添加反应液量的 1/10, 即可停止反应, 进行电泳。在室温下保存时, SDS 有时也会出现沉淀, 此时请在温水浴中溶解后使用。

### 注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 Takara Bio Inc. 书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品, 或者使用 Takara 产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站

[www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com)。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc. 网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201808Da